



K2 - K3
2 impianti
1 sola connessione
ESAGONO INTERNO



V4
1 impianto
CONNESSIONE CONICA

CATALOGO



 www.fds76.com

 info@fds76.com

 +39.0965.921832

 +39.380.2623587

 Via Giosuè Carducci, 10
89018 - Villa San Giovanni
Reggio Calabria - ITALIA





DISTRIBUTORE DI IMPIANTI DENTALI E BIOMATERIALE

FDS76 offre soluzioni semplici e affidabili per tutte le possibili situazioni cliniche.

Qual'è il segreto del nostro successo?

1. Ci impegnamo a fornire impianti dentali, prodotti e sistemi della migliore qualità.
2. Ottimo servizio e supporto ai nostri Clienti.



LA NOSTRA AZIENDA



Chi Siamo

FDS76 è un'azienda altamente professionale, dinamica ed innovativa con oltre 10 anni di esperienza nel campo medico.

FDS76 distribuisce una vasta gamma di dispositivi di alta precisione per il mercato dell'odontoiatria utilizzando una varietà di materie prime di altissima qualità.

Qualità ed Eccellenza

I produttori di **FDS76** si impegnano a guidare il processo di produzione attraverso la qualità e l'eccellenza, che è caratterizzata nei seguenti modi:

- processi di produzione controllati, secondo gli standard di certificazione di gestione della qualità come: ISO 13485:2003 certificata dall'Istituto israeliano standard e ISO 13485.

L'azienda segue anche il Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008.

I prodotti di questo catalogo hanno tutte le certificazioni CE.



LA NOSTRA PRODUZIONE

Ci affidiamo ad un produttore leader e fornitore mondiale di impianti dentali di alta qualità.

Con strutture produttive all'avanguardia e un sistema di controllo della qualità rigoroso e certificato, l'azienda produce un'ampia gamma di sistemi implantari per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

Grazie alla nostra qualità, decenni di esperienza e varietà di produzione.

NOSTRI MATERIALI

Tutti gli impianti **FD576** sono realizzati in lega di titanio Ti-6Al-4V ELI. Queste leghe sono attualmente i migliori materiali in titanio utilizzati in campo dentale.

Queste leghe, sono ottenute aggiungendo il 6% di alluminio e il 4% di metalli di vanadio per conferire superiore proprietà tra cui un elevato rapporto resistenza / peso, resistenza molto alta alla corrosione, alta capacità di elasticità ed eccellente osteointegrazione.


Le leghe Ti-6Al-4V ELI utilizzate dagli impianti **FD576** hanno questa speciale capacità ossia di permettere all'osso di crescere nel metallo e formare un forte legame naturale, attraverso un processo noto come osteointegrazione.



LE NOSTRE MACCHINE

I nostri produttori hanno un ampio numero di macchine controllate (CNC) specializzate per la fabbricazione di impianti e professionisti che controllano e gestiscono la produzione.

Le nostre operazioni di produzione sono dirette da un team ben coordinato di medici esperti e ingegneri professionisti che si concentrano sullo sviluppo, sulla progettazione e, soprattutto, la costruzione di prodotti innovativi per il settore medico impianti dentali fornendo così qualità e affidabilità su tutti i nostri prodotti.

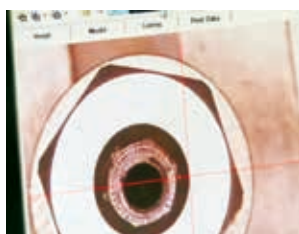

IL NOSTRO TRATTAMENTO DI SUPERFICIE

In seguito ai buoni risultati forniti dalle due tecniche sottrattive precedenti, si è pensato di unirne i vantaggi in un unico trattamento, al fine di ottenere una superficie SLA®. La prima fase di sabbiatura consente di avvicinarsi molto ad una rugosità che determini un fissaggio meccanico forte, l'attacco acido perfeziona invece la conformazione topografica (smussa i picchi che si creano in seguito alla formazione delle microcavità) ed aiuta a promuovere l'adesione delle proteine, considerata fondamentale nelle fasi iniziali della guarigione ossea.

La superficie risultante non è la più ruvida che si possa avere, ma assicura una buona ritenzione meccanica che le morfologie anche più irregolari non favoriscono.

Una superficie SLA® esplica dunque una maggiore integrazione con il tessuto, se paragonata ad una machined. I confronti con gli altri tipi di superficie non forniscono sempre delle valide argomentazioni per decretare la superiorità o l'inferiorità di questo tipo di impianti: è possibile comunque affermare che un trattamento così combinato consente di raggiungere una rugosità media (Fig. 5.5) ed una buona resistenza alla trazione, indispensabili per la stabilità del contatto osso-impianto. Figura 5.5: Ingrandimenti al SEM di superfici SLA®.

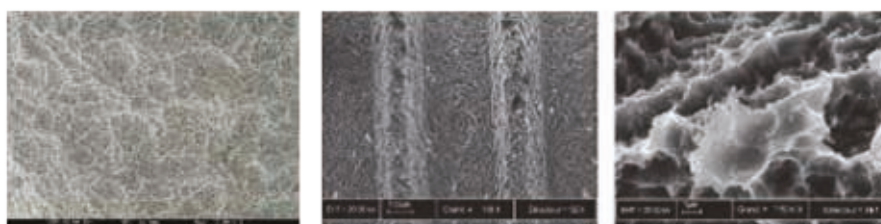


Figura 5.5: Ingrandimenti al SEM di superfici SLA®.

	Titanio				Lega
	Qualità 1	Qualità 2	Qualità 3	Qualità 4	Ti6Al4V
Carico a rottura (Mpa)	240	345	450	550	860
Carico di snervamento (Mpa)	170	275	380	485	795
Allungamento a rottura (%)	24	20	18	15	10
Modulo elastico E (Gpa)	103	103	103	105	114
Strizione a rottura (%)	30	30	30	25	25

IL NOSTRO TITANIO Ti6Al4V

RISULTATI

Per garantire la qualità della produzione, i nostri campioni sono soggetti a Spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) e al microscopio elettronico a scansione (SEM). Questi test forniscono dettagli a livello di nanosuperficie e struttura dei nostri prodotti e confermano l'eccellente qualità dei nostri impianti.

IL NOSTRO IMPIANTO È STERILE E SICURO

Testiamo continuamente i componenti dei più importanti produttori del mondo.

La nostra camera bianca offre l'ambiente ideale in cui imballare con cura i nostri prodotti.

I nostri impianti presentano una confezione formato doppio blister, di cui quello interno è sterile, quello esterno e' di sicurezza.



LA NOSTRA STERILIZZAZIONE

Uno degli elementi chiave del nostro sistema è la nostra stretta cooperazione con impianti fornitori di sterilizzazione e radiazione.

La sterilizzazione con raggi gamma è attualmente una delle migliori tecniche di sterilizzazione per blister sigillati. Tutto ciò assicura che non siano presenti organismi contaminanti nei blister contenenti gli impianti.



FDS76 è orgogliosa di presentare la propria gamma di sistemi implantari, fornendo soluzioni semplici per tutte le procedure cliniche. Ogni impianto ha una forma evoluta basata su una lunga storia di ricerca e sviluppo.



Marchio CE Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali nella direttiva europea sui dispositivi medici 93/42 / CEE.



Marchio CE comprensivo del numero di identificazione OBELIS S.A. (organismo notificato). Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva europea 93/42 / CEE sui dispositivi medici.



Sterilizzato usando l'irradiazione



Lotto



Numero di catalogo



Attenzione



Non riutilizzare



Non usare se la confezione è danneggiata



Data di produzione



Fabbricante



Data di scadenza



Consulta le istruzioni per l'uso (IFU)



Rappresentante europeo


Rx Only

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita questo dispositivo solo alla prescrizione

COMPONENTI PER ESAGONO INTERNO

Compatibilità


Tutte le protesi di FD576 sono compatibili con qualsiasi esagono interno standard con sistemi di bloccaggio da 2,42 a 2,43 mm e con qualsiasi altro impianto di aziende diverse con la stessa connessione. Tuttavia, consigliamo vivamente di utilizzare i nostri impianti con i nostri abutment per garantire una connessione perfetta tra l'impianto e l'abutment. Ciò assicurerà anche il tasso di successo dei nostri impianti.

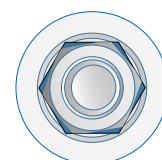

esagono
interno

Qualità e precisione

Utilizziamo la più recente tecnologia di tornitura e fresatura per garantire che tutti gli abutment siano di altissima qualità e realizzati con precisione. Inoltre, l'elevata precisione della connessione impianto/abutment impedisce infiltrazioni batteriche.

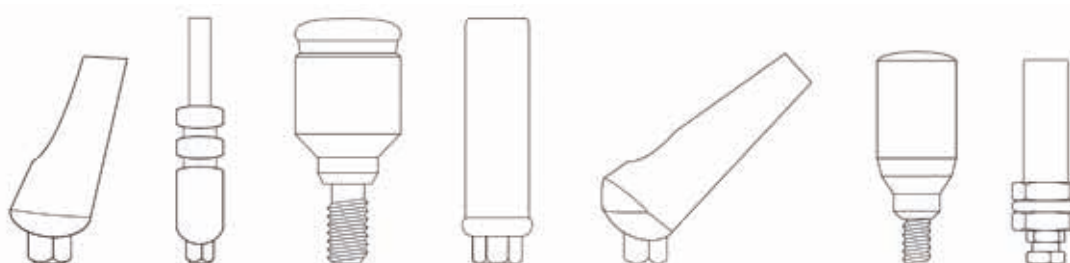



K2 - K3
PIATTAFORMA ESAGONALE

Due impianti - 1 Connessione

Esagono Interno 2.43 mm

Impianto a Spire Larghe - **K2**

Esagono Interno
SLA™ Trattamento di
Superficie

2,43



K3 - Impianto a Spire Strette

Esagono Interno
SLA™ Trattamento di
Superficie

2,43



PROTOCOLLO CHIRURGICO

K2					K3				
OSSO					OSSO				
Ø 3,50	D1	●	○	●	●	○	●	●	●
	D2-D3	●	○	●	●	○	●	●	●
	D4	●	○	●	●	○	●	●	●
Ø 3,75	D1	●	○	●	●	○	●	●	●
	D2-D3	●	○	●	●	○	●	●	●
	D4	●	○	●	●	○	●	●	●
Ø 4,20	D1	●	○	●	●	○	●	●	●
	D2-D3	●	○	●	●	○	●	●	●
	D4	●	○	●	●	○	●	●	●
Ø 5,00	D1	●	○	●	●	○	●	●	●
	D2-D3	●	○	●	●	○	●	●	●
	D4	●	○	●	●	○	●	●	●
Ø 6,00	D1	●	○	●	●	○	●	●	●
	D2-D3	●	○	●	●	○	●	●	●
	D4	●	○	●	●	○	●	●	●


Diametro impianto dentale
OSSO* Durezza osso da D1 (morbido) a D4 (duro)

* **Tipo D1:** osso con corticale denso e scarsa spongiosa.
 * **Tipo D2:** osso con corticale spessa e spongiosa a maglie strette.
 * **Tipo D3:** osso con corticale sottile e spongiosa a maglie strette.
 * **Tipo D4:** osso con corticale sottile e spongiosa a maglie larghe.

- Il protocollo chirurgico suggerito è solo una raccomandazione e non deve sostituire il parere medico.
- Gli impianti possono essere inseriti immediatamente quando è stata raggiunta una buona stabilità primaria (45 Ncm) e con un carico occlusale adeguato.




2 IMPIANTI 1 SOLA CONNESSIONE

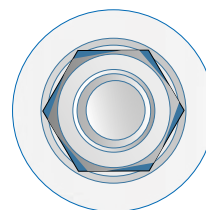

esagono
interno

K2

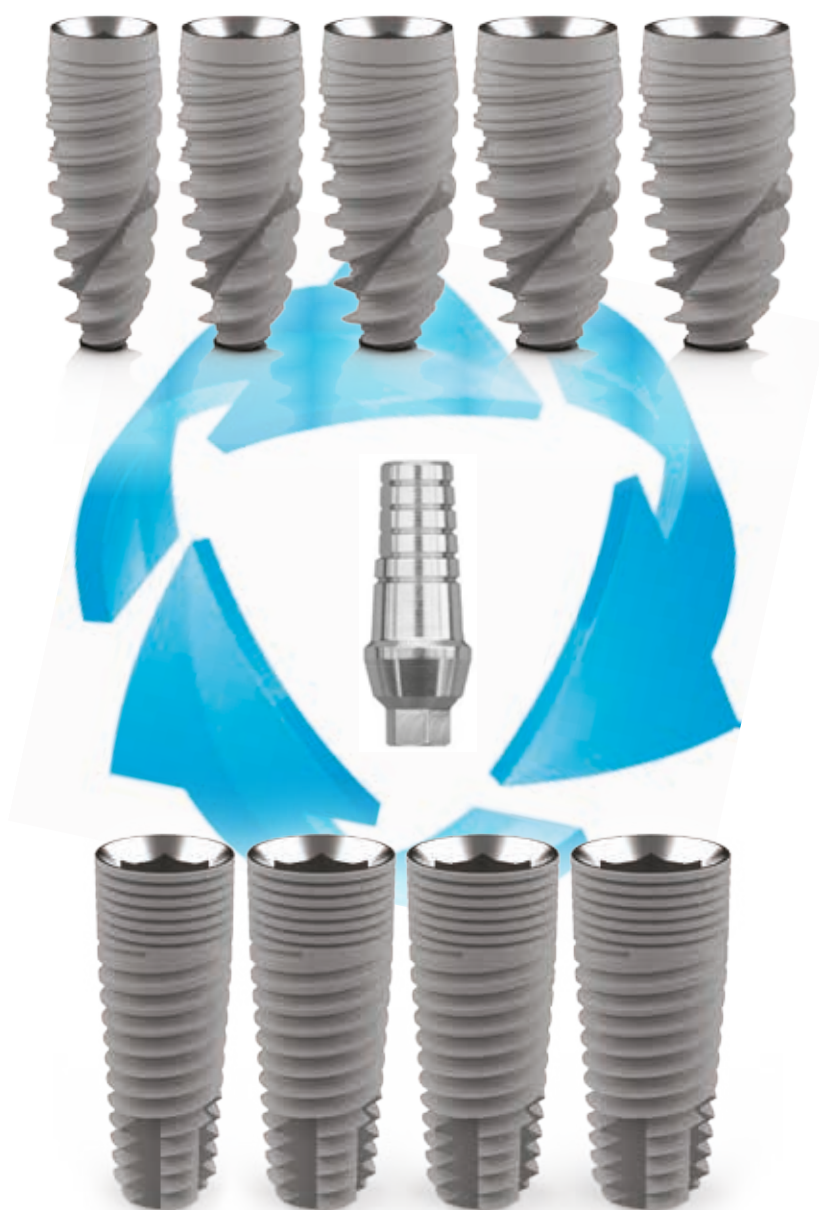

K3




K2 - Impianto a Spire Larghe

Questo impianto ha eccezionali capacità di autopercuisione.

Ha un design a spirale unica che gli permette di cambiare la sua posizione durante il posizionamento e ottenere una stabilità primaria molto elevata.

CARATTERISTICHE

- Una piattaforma per tutti i diametri
- Inserimento molto facile e regolare
- Indicato per i tipi di osso D2-D3-D4
- Autofilettante
- Elevata condensazione dell'osso
- Ideale per carico immediato
- Superficie SLA

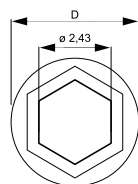

SEMPLICE - Un sistema protesico per entrambi gli impianti, consente l'uso con qualsiasi moncone, con qualsiasi diametro e qualsiasi piattaforma. Abbiamo monconi dedicati per i diametri da 5,0 mm e da 6,0 mm.

Raccomandiamo di usare le nostre componenti protesiche per potervi garantire un perfetto accoppiamento tra impianto e moncone.



COMPATIBILITÀ - FDS76

è compatibile con i sistemi ad esagono interni esistenti sul mercato.

Inoltre, raccomandiamo di usare le nostre componenti protesiche per potervi garantire un perfetto collegamento tra impianto e moncone.

	diametro ø 3,5 mm	codice NUMERO	diametro 1 ø 3,5 mm
LUNGHEZZA	8 mm	CH-0835	2,5
	10 mm	CH-1035	2,5
	11,5 mm	CH-1135	2,5
	13 mm	CH-1335	2,5
	16 mm	CH-1635	2,5

	diametro ø 3,75 mm	codice NUMERO	diametro 1 ø 3,75 mm
LUNGHEZZA	8 mm	CH-0837	2,9
	10 mm	CH-1037	2,9
	11,5 mm	CH-1137	2,9
	13 mm	CH-1337	2,9
	16 mm	CH-1637	2,9

	diametro ø 4,2 mm	codice NUMERO	diametro 1 ø 4,2 mm
LUNGHEZZA	6 mm	CH-0642	3,1
	8 mm	CH-0842	3,1
	10 mm	CH-1042	3,1
	11,5 mm	CH-1142	3,1
	13 mm	CH-1342	3,1
	16 mm	CH-1642	3,1

	diametro ø 5,0 mm	codice NUMERO	diametro 1 ø 5,0 mm
LUNGHEZZA	6 mm	CH-0650	3,6
	8 mm	CH-0850	3,6
	10 mm	CH-1050	3,6
	11,5 mm	CH-1150	3,6
	13 mm	CH-1350	3,6
	16 mm	CH-1650	3,6

	diametro ø 6,0 mm	codice NUMERO	diametro 1 ø 6,0 mm
LUNGHEZZA	6 mm	CH-0660	5,2
	8 mm	CH-0860	5,2
	10 mm	CH-1060	5,2
	11,5 mm	CH-1160	5,2
	13 mm	CH-1360	5,2




K3 - Impianto a Spire Strette

Gli impianti a spira stretta sono progettati specialmente per i trattamenti che coinvolgono osso di tipo I ed, a volte, utilizzati in osso di tipo II.

Il design affusolato consente di posizionare l'impianto nell'ideale posizione sia per una migliore estetica che per una migliore distribuzione del carico.

CARATTERISTICHE

- Una piattaforma per tutti i diametri
- Inserimento molto facile e regolare
- Un'elevata stabilità primaria
- Indicato per i tipi di osso D1-D2
- Spire apicali
- Superficie SLA
- Aumento dei BIC (contatto tra l'osso e l'impianto)
- Minima pressione sull'osso
- Switching Platform

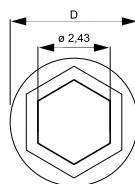

SEMPLICE - Un sistema protesico per tutti gli impianti, consente l'uso di qualsiasi moncone con qualsiasi diametro e qualsiasi piattaforma.



COMPATIBILITÀ - FDS76

è compatibile con i sistemi ad esagono interni esistenti sul mercato.

Inoltre, raccomandiamo di usare le nostre componenti protesiche per potervi garantire un perfetto collegamento tra impianto e moncone.

diametro	codice	diametro 1
ø 3,3 mm	NUMERO	ø 3,3 mm
8 mm	BO-0833	2,7
10 mm	BO-1083	2,7
11,5 mm	BO-1133	2,7
13 mm	BO-1333	2,7


diametro	codice	diametro 1
ø 3,75 mm	NUMERO	ø 3,75 mm
8 mm	BO-0837	3,2
10 mm	BO-1037	3,2
11,5 mm	BO-1137	3,2
13 mm	BO-1337	3,2

diametro	codice	diametro 1
ø 4,2 mm	NUMERO	ø 4,2 mm
8 mm	BO-0842	3,6
10 mm	BO-1042	3,6
11,5 mm	BO-1142	3,6
13 mm	BO-1342	3,6


diametro	codice	diametro 1
ø 5,0 mm	NUMERO	ø 5,0 mm
8 mm	BO-0850	4,4
10 mm	BO-1050	4,4
11,5 mm	BO-1150	4,4
13 mm	BO-1350	4,4

Moncone Zirconia

Moncone zirconia dritto

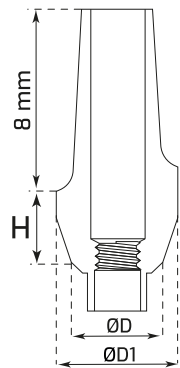


	Code	H (mm)	ØD1 (mm)	ØD (mm)
	ZAT1	1	5,2	3,75
	ZAT2	2	5,2	3,75
	ZAT3	3	5,2	3,75

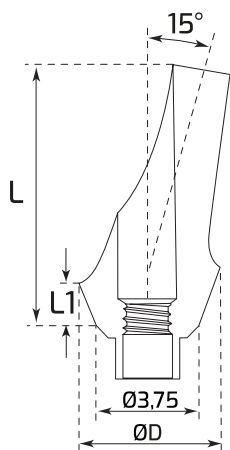

Moncone zirconia angolato 15°

	Code	L1 (mm)	L (mm)	ØD (mm)	a°
	ZAT1501	1	9,5	5,4	15
	ZAT1502	2	9,5	5,4	15

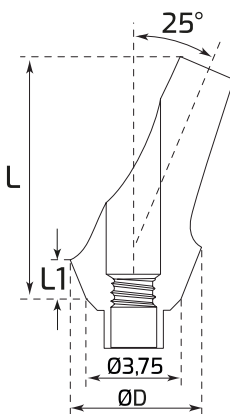

Moncone zirconia angolato 25°

	Code	L1 (mm)	L (mm)	ØD (mm)	a°
	ZAT1501	1	9,5	5,4	25
	ZAT1502	2	9,5	5,4	25



PROTESI | Monconi Dritti


È disponibile un'ampia gamma di abutment dritti in titanio per l'uso in diverse situazioni. Questi monconi rimangono stabili, anche quando lo spessore della parete è ridotto a 0,1 mm. Sono utilizzati nella fabbricazione di restauri cementati, corone singole o ponti

Raccomandazione: stringere la vite con una forza compresa tra 25 e 30 Nm


CARATTERISTICHE

- Può essere utilizzato con due piattaforme: standard e narrow
- L'area di smussatura e il design del moncone garantiscono un'intima unione tra impianto e moncone.
- Il serraggio periferico, insieme alla sezione ad anello della componente secondaria, consente un inserimento ed un montaggio semplice e preciso
- La smussatura interna impedisce il disinnesto della vite di fissaggio dall'impianto.

Moncone Dritto Regular 2,43mm - Ø 4,5 mm

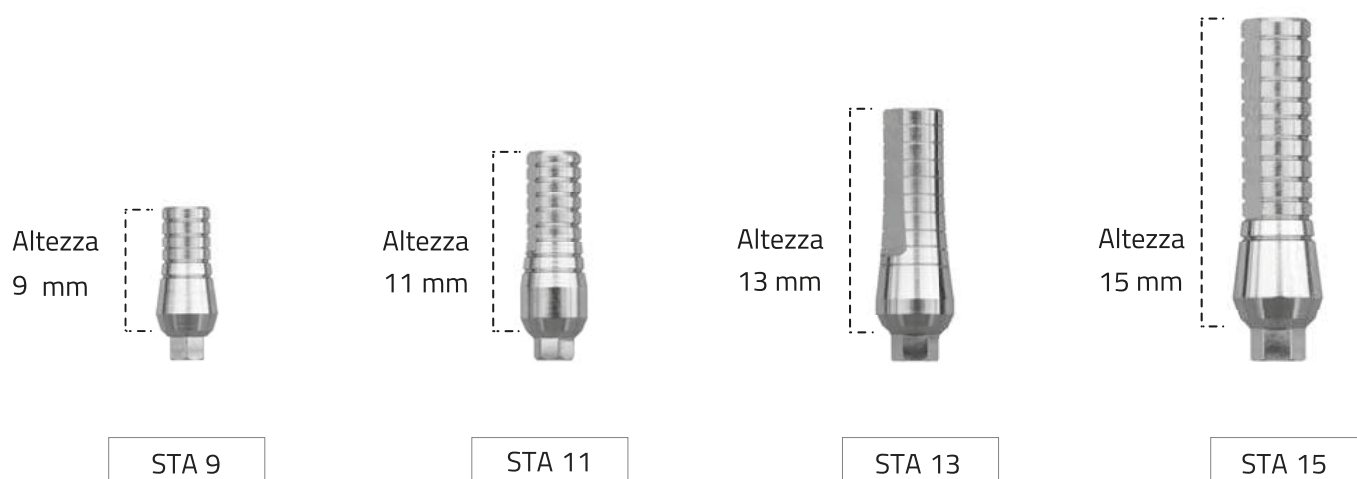

Moncone Dritto Narrow 2,43mm - Ø 3,8 mm

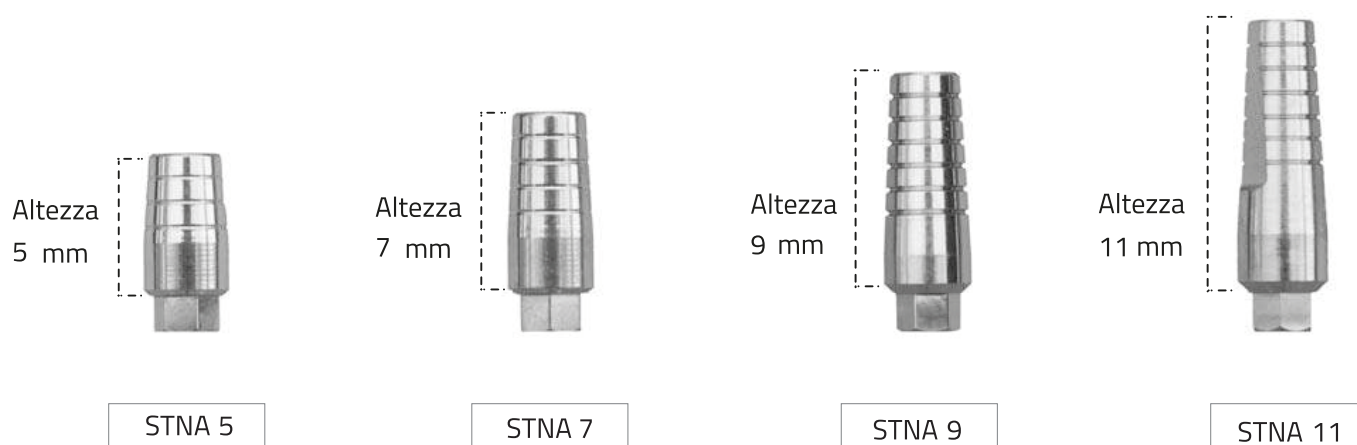


PROTESI | Monconi Dritti


Moncone con Spalla 2,43mm - Ø 4,5mm



Moncone Largo con Spalla 2,43mm - Ø 5,5mm

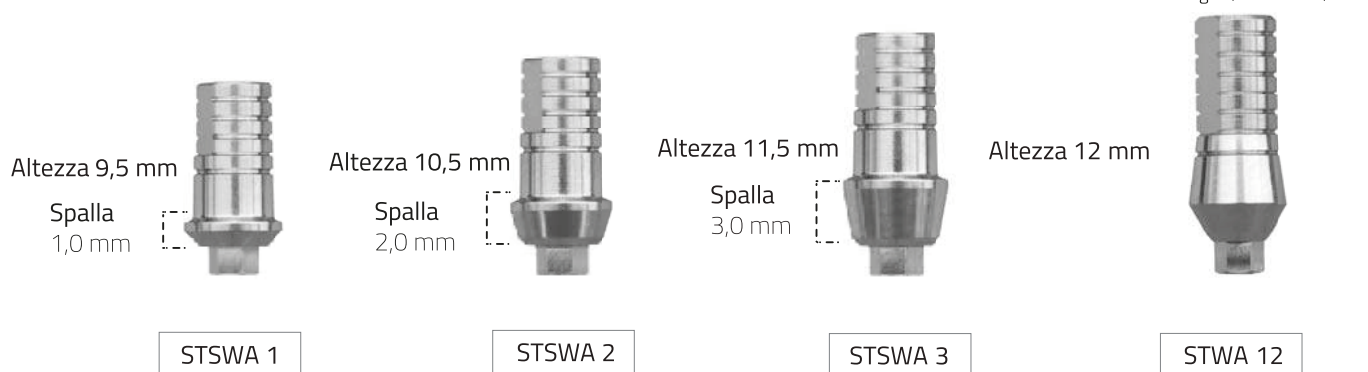

Moncone Provvisorio

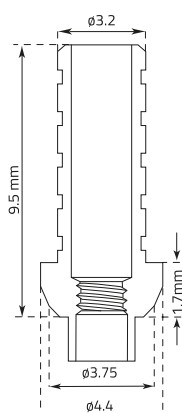

PROTESI | Monconi Angolati

I monconi angolati vengono utilizzati per la costruzione di corone singole o creste cementate o quando si cambia l'asse dell'impianto. I monconi sono disponibili con angoli di 15° e 25°

Raccomandazione: stringere la vite con una forza compresa tra 25 e 30 Ncm



Moncone Angolato Regular 2,43mm - Ø4,7mm



Moncone Angolato con Spalla 2,43mm - Ø4,7mm

Altamente raccomandato per una connessione ottimale tra impianto e moncone. Si adatta perfettamente per carico sia immediato che differito.

I nuovi monconi 35° e 45° consentono la riabilitazione protesica anche in casi particolari, per i quali è necessaria un'angolazione acuta. I nuovi monconi si aggiungono alla vasta gamma di soluzioni protesiche angolate, con due nuove angolazioni da 35° e 45°.

	SPALLA	LUNGO	CODICE
15°	1,0 mm	9 mm	STAA 15° 1
	2,0 mm	9 mm	STAA 15° 2
	3,0 mm	9 mm	STAA 15° 3
	4,0 mm	9 mm	STAA 15° 4

	SPALLA	LUNGO	CODICE
25°	1,0 mm	9 mm	STAA 25° 1
	2,0 mm	9 mm	STAA 25° 2
	3,0 mm	9 mm	STAA 25° 3

Moncone Angolato 35°

	LUNGO
	9 mm
	CODICE
	STAA-35°

Moncone Angolato 45°

	LUNGO
	9 mm
	CODICE
	STAA-45°

PROTESI | Vite di guarigione

Selezionare il tappo di guarigione corretto dipende dallo spessore della mucosa.

Le viti di guarigione WIDE sono utilizzate per la guarigione dei tessuti molli in zona molare e premolare.

Raccomandazione: serrare a mano utilizzando un cacciavite esagonale da 1,25 mm o a supporto motore con una coppia di 15 Ncm

CARATTERISTICHE

- è presente un anello di sollevio sul lato interno della superficie
- Questo aiuta la precisione e ottimizza la ritenzione

Ø3,75 Vite di guarigione Narrow 2,43mm



Ø4,6 Vite di guarigione Standard 2,43mm



Ø5,5 Vite di guarigione Larga 2,43mm



Ø6,0 Vite di guarigione Extra Larga 2,43mm



Ø3,75 Vite di guarigione Concava 2,43mm



TRANSFER | Analogo

Abbiamo transfer da impronta sia per la tecnica a cucchiaio aperto (OPEN-TRY) che per la tecnica a cucchiaio chiuso (CLOSED-TRY).

Il corpo del transfer è in acciaio inossidabile, mentre le viti in lega di titanio.

Raccomandazione: stringere la vite con una forza compresa tra 25 e 30 Ncm

Opened & Closed Tray Transfers

	ST 9	Cucchiaio Aperto - Ø4,6mm - Altezza 9mm	vite passante	Ti Grade 5
	ST 13	Cucchiaio Aperto - Ø4,6mm - Altezza 13mm	vite passante	Ti Grade 5
	Stw 13	Cucchiaio Aperto - Ø5,5mm - Altezza 12mm	vite passante	Ti Grade 5

Clip-On Transfers

E' disponibile anche il transfer di tipo CLIP-ON . È particolarmente efficace con i molari e premolari, dove c'è mancanza di spazio, e dove è difficile lavorare. È sufficiente utilizzare questo transfer per tutti tipi di impronte in quanto l'assenza di viti consente di risparmiare una quantità significativa di tempo.

	STC 9	Cucchiaio Chiuso - Ø4,6mm - Altezza 9mm	Clip-On	Ti Grade 5
	STC 13	Cucchiaio Chiuso - Ø4,6mm - Altezza 13mm	Clip-On	Ti Grade 5

Snap On Transfers


	SPUT 1	Cucchiaio Chiuso - Ø4,7mm - Altezza 9mm	Snap-On	Ti Grade 5
	PFPUT	Cucchiaio Chiuso - Ø4,6mm - Altezza 9mm	Snap-On	Plastic

Analogo da Laboratorio

	SIA 375	Analogo da Laboratorio Regolare - Ø3,75mm	Esagono	Ti Grade 5
	SIA 500	Analogo da Laboratorio Largo - Ø5,00mm	Esagono	Ti Grade 5

Multi Unit Angolati

Fornisce la gamma più ampia di correzione dell'angolazione, garantendo resistenza versatilità e semplicità senza compromessi.

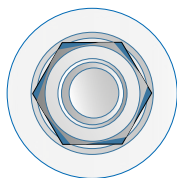


esagono interno

Multi-unit a 45°



MU4510 multi unit inclinato 45° h = 1

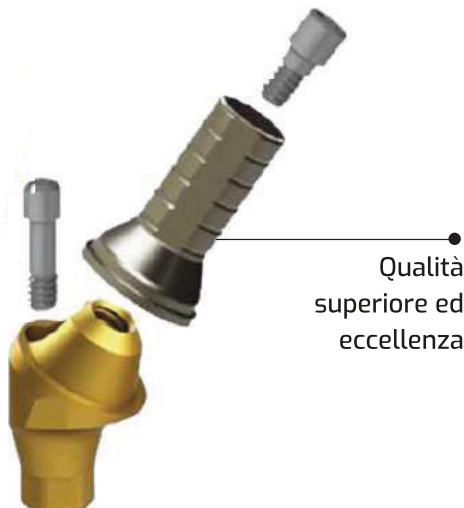

Qualità
superiore ed
eccellenza

Multi-unit 30°



MU3010 multi unit inclinato 30° h = 1



MU3020 multi unit inclinato 30° h = 2

Multi-unit 17°



MU1710 multi unit inclinato 17° h = 1



MU1720 multi unit inclinato 17° h = 2



SSTFMU

Torretta in titanio per multi unit

Ti Grado 5



SSPFMU

Calcinabile per multi unit

Calcinabile



STFMU

Transfer per multi unit

Ti Grado 5



SAFMU

Analogo per multi unit

Ti Grado 5



SSFMU

Vite per multi unit

Ti Grado 5



SHCFMU

Vite di guarigione

Ti Grado 5

PROTESI | Multi Unit Dritti

Il sistema Multi-Unit offre una soluzione per protesi avvitata su impianti complicati da ripristinare (ad esempio, impianti multipli inclinati).
Il sistema Multi-Unit comprende una gamma completa di misure.

CARATTERISTICHE

- Restauri con più unità
- Avvitato
- Soluzioni per barra overdenture rimovibili e fisse.
- Disponibile in 5 altezze 1, 2, 3, 4, 5 mm



Monconi

	SSTFMU	Torretta in titanio per multi unit	Ti Grado 5
	SSPFMU	Calcinabile per multi unit	Calcinabile
	STFMU	Transfer per multi unit	Ti Grado 5
	SAFMU	Analogo per multi unit	Ti Grado 5
	SSFMU	Vite per multi unit	Ti Grado 5
	SHCFMU	Vite di guarigione	Ti Grado 5
	BTMUN	Chiavetta multi unit dritta	

PROTESI | Multi Unit Kit Angolati

Composizione Kit 17°



17°



- Multi unit angolato 17° h=1 mm **MUL-ZI-RPKS1710K**
- kit composto da :
- Multi unit angolato 17° h=1 mm
- Analogo
- Transfer
- Moncone in titanio
- Moncone calcinabile
- Cappetta di guarigione
- 2 viti di connessione

H= 1 mm
G= 2,4 mm

- Multi unit angolato 17° H=2MM **MUL-ZI-RPKS1720**
- kit composto da :
- Multi unit angolato 17° h=2 mm
- Analogo
- Transfer
- Moncone in titanio
- Moncone calcinabile
- Cappetta di guarigione
- 2 viti di connessione

H= 2 mm
G= 3,3 mm

Kit 30°



30°



- Multi unit angolato 30° h=1 mm **MUL-ZI-RPKS3010K**
- kit composto da :
- Multi unit angolato 30° h=1 mm
- Analogo
- Transfer
- Moncone in titanio
- Moncone calcinabile
- Cappetta di guarigione
- 2 viti di connessione

H= 1 mm
G= 3,3 mm

- Multi unit angolato 30° H=2MM **MUL-ZI-RPKS3020**
- kit composto da :
- Multi unit angolato 30° h=2 mm
- Analogo
- Transfer
- Moncone in titanio
- Moncone calcinabile
- Cappetta di guarigione
- 2 viti di connessione

H= 2 mm
G= 4,4 mm

45°



- Multi unit angolato 45° h=1 mm **MUL-ZI-RPKS4510K**
- kit composto da :
- Multi unit angolato 45° h=1 mm
- Analogo
- Transfer
- Moncone in titanio
- Moncone calcinabile
- Cappetta di guarigione
- 2 viti di connessione

H= 1 mm
G= 5,5 mm

Kit Multi Unit Dritto

Composizione Kit dritto



MUL-ZI-RPKS10K

- **Multi unit dritto**
h=1 mm kit
composto da :
 - Multi unit dritto h=1 mm
 - Analogo
 - Transfer
 - Moncone in titanio
 - Moncone calcinabile
 - Cappetta di guarigione
 - 2 viti di connessione

MUL-ZI-RPKS20K

- **Multi unit dritto**
h=2 mm kit
composto da :
 - Multi unit dritto h=2 mm
 - Analogo
 - Transfer
 - Moncone in titanio
 - Moncone calcinabile
 - Cappetta di guarigione
 - 2 viti di connessione

MUL-ZI-RPKS30K

- **Multi unit dritto**
h=3 mm kit
composto da :
 - Multi unit dritto h=3 mm
 - Analogo
 - Transfer
 - Moncone in titanio
 - Moncone calcinabile
 - Cappetta di guarigione
 - 2 viti di connessione

MUL-ZI-RPKS40K


- **Multi unit dritto**
h=4 mm kit
composto da :
 - Multi unit dritto h=4 mm
 - Analogo
 - Transfer
 - Moncone in titanio
 - Moncone calcinabile
 - Cappetta di guarigione
 - 2 viti di connessione

MUL-ZI-RPKS50K


- **Multi unit dritto**
h=5 mm kit
composto da :
 - Multi unit dritto h=5 mm
 - Analogo
 - Transfer
 - Moncone in titanio
 - Moncone calcinabile
 - Cappetta di guarigione
 - 2 viti di connessione

PROTESI | Cad Cam

FD576 presenta una gamma completa di componenti protesiche per le procedure CAD/CAM per connessione a Esagono Interno.

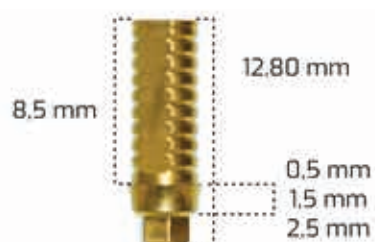

V45
T BASE ESTETICO
NON ROTANTE
H 0,5 mm: V4 S05
H 1,5 mm: V4 S150
H 2,5 mm: V4 S250

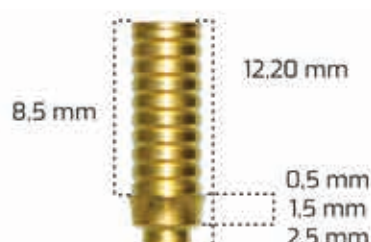

V45N
T BASE ESTETICO
ROTANTE
H 0,5 mm: V4 S05N
H 1,5 mm: V4 S150N
H 2,5 mm: V4 S250N



Driver manuale per fori angolari
H195




Driver studio per fori angolari
H196

Scan body Multi Unit



Multi-Unit
MSB005DG

Ti Base Multi Unit

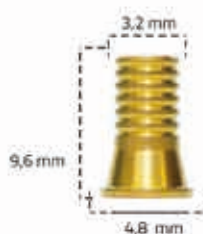

Multi-Unit
E190


Analogo 3D per MUA



Analogo 3D per MUA
D190

Richiedi gratuitamente le librerie
EXOCAD-3SHAPES-DENTALWINGS.
Invia una e-mail a:
info@fds76.com

Scan body

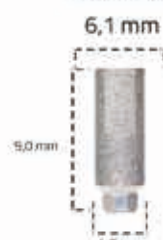


Non Rotante
5B0DP9

Analogo 3D




Analogo 3D
D185

Ti Base

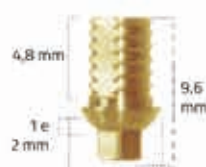

Non Rotante Molar
H1 mm codice: E186
H2 mm codice: E187

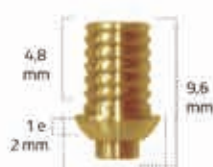


Rotante Molar
H1 mm codice: E188
H2 mm codice: E189



T-Base Non Rotante angolato
H1 mm: E191
H2 mm: E192




T-Base Rotante angolato
H1 mm: E201
H2 mm: E202

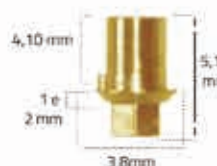

T-Base Non Rotante slim
E199



T-Base Rotante slim
E200

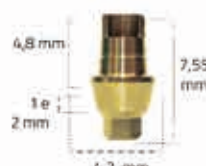

T-Base Non Rotante standard
H 0,5 mm: CRT005
H 1,5 mm: CTB150
H 2,5 mm: CTB250



T-Base Rotante standard
H 0,5 mm: CTB005R
H 1,5 mm: CTB150R
H 2,5 mm: CTB250R

PROTESI | Monconi a pallina per overdenture

CARATTERISTICHE

La spalla del pilastro deve essere almeno 1 mm per prevenire il conflitto con i tessuti molli e la protesi. Importante misurare sempre l'altezza del tessuto molle per selezionare il moncone a pallina più adatto

- Avvitamento con cacciavite tramite brocciatura in testa
- Disponibile nelle altezze: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- Confezionamento singolo moncone a pallina
- Confezionamento singolo Cappetta in silicone
- Confezionamento singolo Cappetta in metallo
- Ogni parte è venduta separatamente

MONCONI A PALLINA ANGOLATI 18-30-40 (NEW)




Monconi angolati 18°



Monconi angolati 30°



Monconi angolati 40°

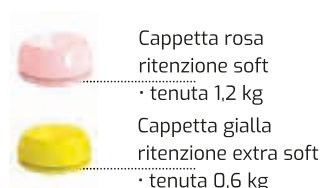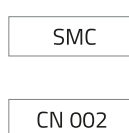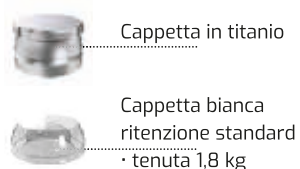

PROTESI | MONCONI LOCAT PER OVERDENTURE

I monconi LOCAT per overdenture sono disponibili in numerose altezze. Scegliere l'altezza del moncone LOCAT in base all'altezza del tessuto molle.

CARATTERISTICHE

Il kit del moncone LOCAT comprende:

- 1 moncone LOCAT in titanio
- 1 tappo in plastica ritenzione hard
- 1 tappo in plastica ritenzione soft
- 1 tappo in plastica ritenzione standard
- 1 distanziale
- 1 cuffia in metallo



MONCONI LOCAT 18-30

Monconi locat 18°



Monconi locat 30°



Analogo
locat



SAFL

CAP SET

Cappetta metallo	Disco protettivo	Cappetta Rosa Soft 1.2 Kg	Cappetta Standard Trasparente 1.8 Kg	Cappetta Hard Viola 2.7 Kg	Analogo
SHC	DP	CN087	CN086	Cn089	AFL

PROTESI | Moncone Calcinabile

APPLICAZIONI E CONSIGLI D'USO - MONCONE CALCINABILE

Il moncone calcinabile serve per i restauri protesici preparati dall'odontotecnico in laboratorio. Per una maggiore precisione di connessione con l'impianto, si consiglia però di utilizzare abutments metallici lavorati industrialmente.

Tuttavia, se si decide di utilizzare il metodo per fusione, si prega di prendere le seguenti precauzioni:

- Utilizzare uno strato di cera che creerà un gap sufficiente attorno al pilastro per compensare il coefficiente di dilatazione tra il materiale calcinabile e quelli attigui.
- Avvitare delicatamente durante la lavorazione per impedire la deformazione nel materiale.
- Eseguire canali di colata di dimensione e forma appropriata, che favoriscano il riempimento delle cavità e che prevengano la formazione di bolle d'aria.
- Utilizzare materiali con elevata fluidità di scorrimento per fusioni su modelli particolari o complessi.

Moncone Calcinabile Regular

Moncone Calcinabile Rotante



SACN

Moncone Calcinabile con Esagono



SACH

UCLA-Moncone con base in Cromo-Cobalto con Esagono



SCA 3,75

UCLA-Moncone con base in Cromo-Cobalto Rotante



SCA 4,00

Moncone Calcinabile Wide

Moncone Calcinabile Wide Rotante



SPAN 9

Moncone Calcinabile Wide non Rotante



SPAH 9



V4
PIATTAFORMA CONICA

V4 - CONNESSIONE CONICA

Introduzione: V4 è un impianto conico, leggermente aggressivo, adatto al carico immediato. È caratterizzato da vite autofilettante con spostamento della piattaforma.

Materiale: Ti-6AL-4VELI (Titanio grado 5)

Trattamento di superficie: SLA

Sterilizzazione: Raggi gamma

DESIGN CONICO CON MICRO ANELLI

- Supporto ottimale dei tessuti molli
- Volume massimo dell'osso alveolare
- Meno riassorbimento crestale

SPIRE APICALI AGGRESSIVE

Consente una eccellente stabilità primaria, indicato per post estrattivi, scarsa qualità ossea e carico immediato

APICALE

- Ancoraggio ottimale

CONNESSIONE

- Connessione Conica 2,25 mm - NP
- Connessione Conica 2,65 mm - RP


SUPERFICIE IMPLANTARE

La micro superficie ottenuta dalla tecnologia SLA si traduce in un migliore ancoraggio meccanico per una migliore stabilità primaria ed è ottimale per l'adesione cellulare


SISTEMA AUTOFILETTANTE

- Autofilettante
- Autocentrante

CONTENUTO BOX

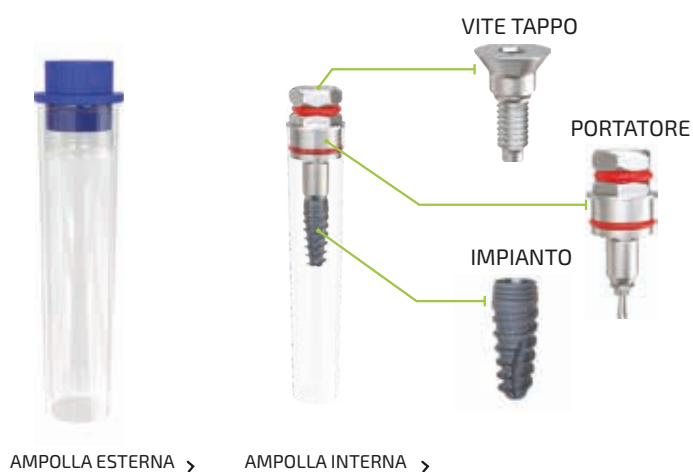

PIATTAFORMA CONICA

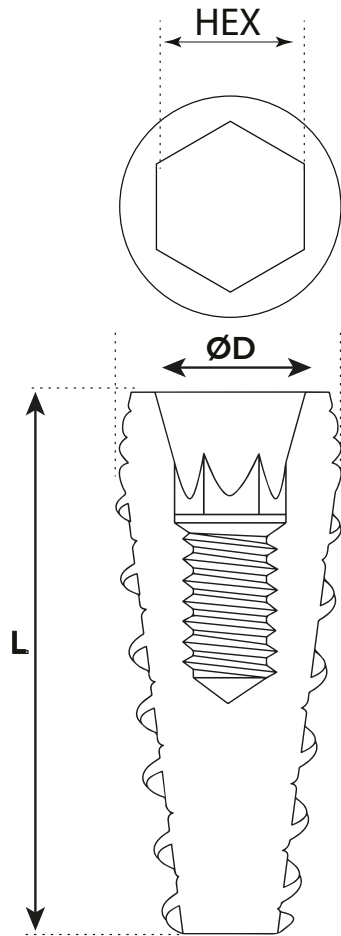

ØD (mm)	HEX (mm)	L (mm)	CAT no.
3.5	2.25	8	NP0835
	2.25	10	NP1035
	2.25	11.5	NP1135
	2.25	13	NP1335
4.3	2.65	6	RP0643
	2.65	8	RP0843
	2.65	10	RP1043
	2.65	11.5	RP1143
	2.65	13	RP1343
5.0	2.65	6	RP0650
	2.65	8	RP0850
	2.65	10	RP1050
	2.65	11.5	RP1150
	2.65	13	RP1350

fare foto e reimpaginare

PROTOCOLLO CHIRURGICO

Ø 2.00 Ø 2.80 Ø 3.20 Ø 3.65 Ø 4.20 Ø 5.20

COUNTERSINK

V4

OSSEO

Ø 3,50 D1 D2-D3 D4

Ø 4,30 D1 D2-D3 D4

Ø 5,00 D1 D2-D3 D4

DLC - FRESA IN CARBONIO

V4

● Diametro impianto dentale

OSSEO* Durezza osso da D1 (morbido) a D4 (duro)

* **Tipo D1:** osso con corticale denso e scarsa spongiosa.

* **Tipo D2:** osso con corticale spessa e spongiosa a maglie strette.

* **Tipo D3:** osso con corticale sottile e spongiosa a maglie strette.

* **Tipo D4:** osso con corticale sottile e spongiosa a maglie larghe.


● Forare in base alla lunghezza dell'impianto

● Forare con fresa attraverso l'osso corticale, solo in caso di osso duro

- Il protocollo chirurgico suggerito è solo una raccomandazione e non deve sostituire il parere medico.
- Gli impianti possono essere inseriti immediatamente quando è stata raggiunta una buona stabilità primaria (45 Ncm) e con un carico occlusale adeguato.

COMPONENTISTICA | Viti di guarigione

PIATTAFORMA NARROW NP

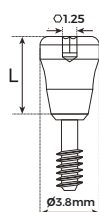

2mm



HCSNP2

3mm



HCSNP3

4mm




HCSNP4

5mm



HCSNP5

PIATTAFORMA REGULAR RP

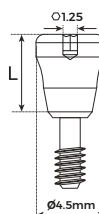

2mm



HCSR2

3mm



HCSR3

4mm



HCSR4


5mm



HCSR5

COMPONENTISTICA | Viti per monconi

PIATTAFORMA NARROW NP

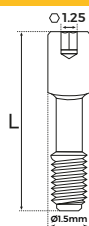


5.1mm



SWNP

PIATTAFORMA REGULAR RP

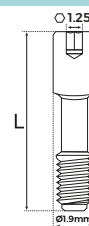

5.1mm



SWRP

COMPONENTISTICA | Transfer & Analoghi

PIATTAFORMA NARROW NP

Open Tray -22mm



STRONP

Closed Tray -14mm



STRCNP

Clip Transfer Short - 9mm



CTR9NP

Clip Transfer Long - 15mm



CTR15NP

Analog



ANGNP

PIATTAFORMA REGULAR RP

Open Tray -22mm



STRORP

Closed Tray -14mm



STRCRP

Clip Transfer Short - 9mm



CTR9RP

Clip Transfer Long - 15mm



CTR15RP

Analog



ANGRP


• Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)

• Raccomandazione: stringere le viti di guarigione usando una coppia di 15 Ncm

COMPONENTISTICA | MONCONI DRITTI

PIATTAFORMA NARROW NP

MONCONI DRITTI NP

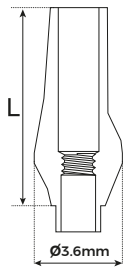

7mm



SANP7

9mm




SANP9

13mm



SANP13

MONCONI DRITTI CON SPALLA NP

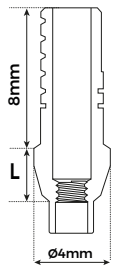

1mm



SASNP1

2mm



SASNP2


3mm



SASNP3

PIATTAFORMA REGULAR RP

MONCONI DRITTI RP

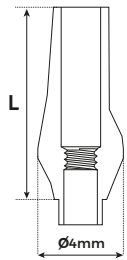

7mm



SARP7

9mm




SARP9

13mm



SARP13

MONCONI DRITTI CON SPALLA RP

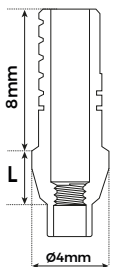

1mm



SASRP1

2mm



SASRP2

3mm




SASRP3

- Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)
- Confezionato con vite per moncone SWNP/SWRP
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 25 Ncm

COMPONENTISTICA | MONCONI INCLINATI


PIATTAFORMA NARROW NP

MONCONI 15° NP

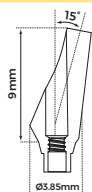

ATA15NP


MONCONI 25° NP

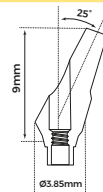

ATA25NP

PIATTAFORMA NARROW NP

MONCONI 15° CON SPALLA NP

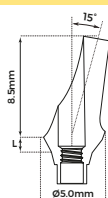

1.5mm



ATA1515NP

3.0mm




ATA1530NP

4.5mm



ATA1545NP

MONCONI 25° CON SPALLA NP

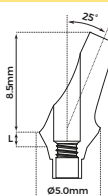

1.5mm



ATA2515NP

3.0mm



ATA2530NP


4.5mm



ATA2545NP


PIATTAFORMA REGULAR RP

MONCONI 15° RP

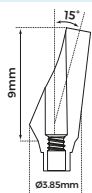

ATA15RP


MONCONI 25° RP

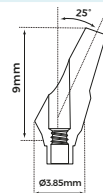

ATA25RP

PIATTAFORMA REGULAR RP

MONCONI 15° CON SPALLA RP

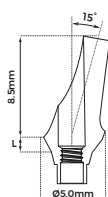

1.5mm



ATA1515RP

3.0mm




ATA1530RP

4.5mm



ATA1545RP

MONCONI 25° CON SPALLA RP

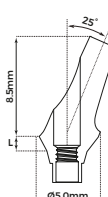

1.5mm



ATA2515RP

3.0mm



ATA2530RP





4.5mm







ATA2545RP

• Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI) • Confezionato con vite per moncone SWNP/SWRP • Raccomandazione: serrare con una coppia di 25 Ncm

COMPONENTISTICA | Monconi provvisori





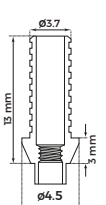
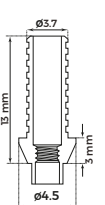
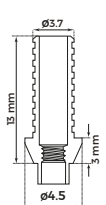
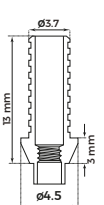
PIATTAFORMA NARROW NP				PIATTAFORMA REGULAR RP			
Rotante NP		Non Rotante NP		Rotante RP		Non Rotante RP	
	STANNP		STARNP		STANRP		STARRP

COMPONENTISTICA | Monconi provvisori in peek

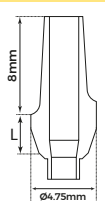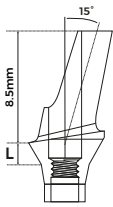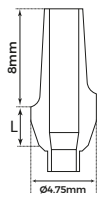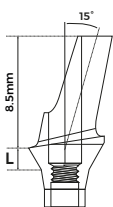PIATTAFORMA NARROW NP			
MONCONI IN PEEK DRITTI CON SPALLA NP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	PAT15NP	PAT30NP	PAT45NP
MONCONI IN PEEK 15° CON SPALLA NP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	PAT1515NP	PAT1530NP	PAT1545NP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
MONCONI IN PEEK DRITTI CON SPALLA RP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	PAT15RP	PAT30RP	PAT45RP
MONCONI IN PEEK 15° CON SPALLA RP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	PAT1515RP	PAT1530RP	PAT1545RP







- Confezionato con vite per moncone SWNP/SWRP
- PEEK (polietereeterchetone)
- Raccomandazione: serrare i Peek MONCONI con un torque di 20 Ncm

COMPONENTISTICA | Calcinabili

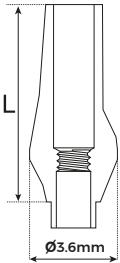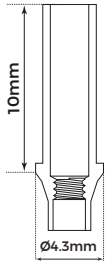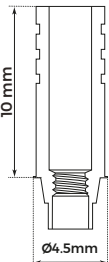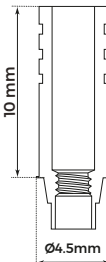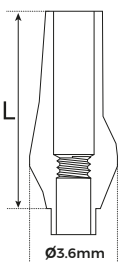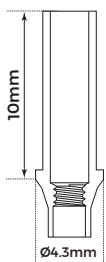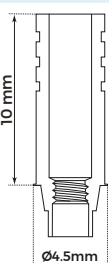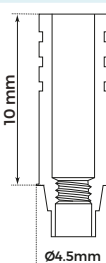PIATTAFORMA NARROW NP			
CALCINABILE ROTANTE NP		CALCINABILE NON ROTANTE NP	
 ROTANTE	 PCNNP	 NON ROTANTE	 PCWNP
PIATTAFORMA NARROW NP			
CALCINABILE BASE IN CROMO COBALTO NP			
 ROTANTE	 CCBNP	 NON ROTANTE	 CCBWNP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
CALCINABILE ROTANTE RP		CALCINABILE NON ROTANTE RP	
 ROTANTE	 PCNRP	 NON ROTANTE	 PCWRP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
CALCINABILE BASE IN CROMO COBALTO RP			
 ROTANTE	 CCBNRP	 NON ROTANTE	 CCBWRP

- Base in cromo cobalto
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 25 Ncm
- Acetale (plastica calcinabile),
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 20 Ncm
- Confezionato con vite per moncone SWRP / SWNP

MULTI - UNIT

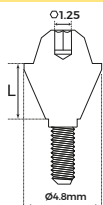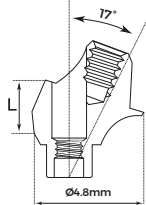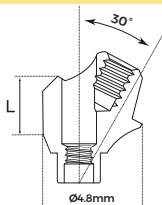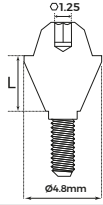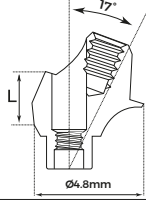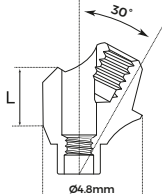PIATTAFORMA NARROW NP					
Multi Unit Dritti NP					
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
					
	MU1NP	MU2NP	MU3NP	MU4NP	MU5NP
Multi Unit 17° NP					
	1mm	2mm			
					
	MU-17-1NP	MU-17-2NP			
Multi Unit 30° NP					
	1mm	2mm			
					
	MU-30-1NP	MU-30-2NP			
PIATTAFORMA REGULAR RP					
Multi Unit Dritti RP					
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
					
	MU1RP	MU2RP	MU3RP	MU4RP	MU5RP
Multi Unit 17° RP					
	1mm	2mm			
					
	MU-17-1RP	MU-17-2RP			
Multi Unit 30° RP					
	1mm	2mm			
					
	MU-30-1RP	MU-30-2RP			



NM-S7101 NP



NM-X7101



NM-S7101 RP



NM-X7101

- Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 30 Ncm

MULTI - UNIT ACCESSORI



TORRETTA IN TITANIO
VITE MU-SA INCLUSA

MU-TSL



TORRETTA CALCINABILE
VITE MU-SA INCLUSA

MU-PSL



ANALOGO PER MULTI
UNIT

MU-ANG



TRANSFER PER MULTI UNIT

MU-TOT



VITE DI GUARIGIONE
PER MULTI UNIT

MU-HC





VITE PER MULTI UNIT

MU-SA

· Raccomandazione: serrare la vite MU-SA con una coppia di 20 Ncm


MONCONI A PALLINA

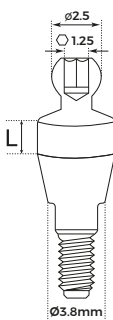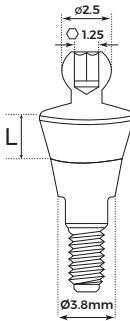
PIATTAFORMA NARROW NP						
MONCONI A PALLINA NP						
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
						
	BAT-NP-1	BAT-NP-2	BAT-NP-3	BAT-NP-4	BAT-NP-5	BAT-NP-6
PIATTAFORMA REGULAR RP						
MONCONI A PALLINA RP						
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
						
	BAT-RP-1	BAT-RP-2	BAT-RP-3	BAT-RP-4	BAT-RP-5	BAT-RP-6

ACCESSORI PER MONCONI A PALLINA

Cappetta metallo	Extra soft 350 g (su ordinazione)	Soft 500 g (su ordinazione)	Standard 1300 g	Analogo
				
MTCB	SYCB	SPCB	SWCB	AFB

LOCAT

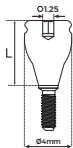PIATTAFORMA NARROW NP					
LOCAT NP					
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
					
	LOC-NP -1	LOC-NP -2	LOC-NP -3	LOC-NP -4	LOC-NP -5

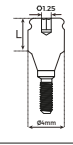PIATTAFORMA REGULAR RP					
LOCAT RP					
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
					
	LOC-RP-1	LOC-RP-2	LOC-RP-3	LOC-RP-4	LOC-RP-5

ACCESSORI PER LOCAT

Cappetta metallo	Disco protettivo	Cappetta Rosa Soft 1.2 Kg	Cappetta Standard Trasparente 1.8 Kg	Cappetta Hard Viola 2.7 Kg	Analogo
					
MTCL	DP	SPCL	SWCL	STCL	AFL

- Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)
- Tutti i LOCAT INCLINATI sono imballati con vite SWRP / SWNP
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 30 Ncm

FRESE

Linea di Frese DNT 2

Una linea di frese chirurgiche e stop innovativa, completa e di facile utilizzo.

Ogni fresa dispone di tacche di profondità evidenziate in contrasto cromatico e codici-colore per una migliore identificazione di profondità dell'osteotomia.

Caratteristiche e vantaggi:


- Rivestimento multi-strato in DNT2 grigio scuro
- Tacche di profondità evidenziate in contrasto cromatico
- Lunga durata nel tempo e resistenza all'usura
- Marcatura laser e codici-colore per una facile identificazione del diametro
- Design finalizzato a contenere il surriscaldamento e massimizzare la stabilità
- Compatibile con tutti i tipi di impianti
- Compatibile con i nostri stop



kit chirurgia classico

MC 001

**PERSONALIZZALO
SECONDO LE TUE
ESIGENZE**

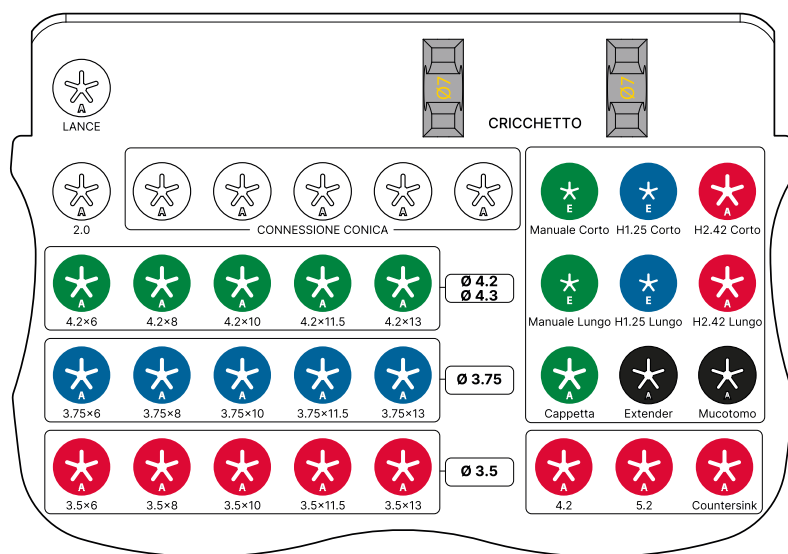

**kit chirurgico
frese calibrate**

MC 003



**kit rialzo
seno mascellare**

MC 007

è facile... è **“SEMPLICE”**



kit chirurgia guidata **SEMPLICE** MC 021

STOP PER FRESE



Codice per ordinare gli Stop per frese



S = Stop Diametro Fresa Lunghezza impianto

Esempio di ordine: S 280 L11,5



kit stop frese

MC 005

ACCESSORI & KIT CHIRURGICI

	Colore	Diametro	Lunghezza	Materiale	Codice
		FRESA	26,0 mm	Ti 5 Grade 5	MDL 190
	Bianco	2,0 Ø	36,5 mm	Drill Like Carbon	PD200L16C
	Rosso	2,0 - 2,8 Ø	36,5 mm	Drill Like Carbon	SD2028L16C
	Blu	2,8 - 3,8 Ø	36,5 mm	Drill Like Carbon	SD2832L16C
	Verde	3,2 - 3,6 Ø	36,5 mm	Drill Like Carbon	SD3236L16C
	Nero	3,6 - 4,2 Ø	36,5 mm	Drill Like Carbon	SD3642L16C
	Marrone	4,6 - 5,2 Ø	36,5 mm	Drill Like Carbon	SD4652L16C
	Nero/Verde	3,75 - 4,2 Ø			CD-3,75x4,2
	Marrone/Bianco	5,0 - 6,0 Ø			CD-5,0x6,0
	Giallo/Rosso	1,9x2,7 - L6	6 mm	Ti 5 Grade 5	TDC1927L6S
	Giallo/Rosso	1,9x2,7 - L8	8 mm	Ti 5 Grade 5	TDC1927L8S
	Giallo/Rosso	1,9x2,7 - L10	10 mm	Ti 5 Grade 5	TDC1927L10S
	Giallo/Rosso	1,9x2,7 - L11,5	11,5 mm	Ti 5 Grade 5	TDC1927L11,5S
	Giallo/Rosso	1,9x2,7 - L13	13 mm	Ti 5 Grade 5	TDC1927L13S
	Giallo/Blu	2,1x3,3 - L6	6 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2133L6S
	Giallo/Blu	2,1x3,3 - L8	8 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2133L8S
	Giallo/Blu	2,1x3,3 - L10	10 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2133L10S
	Giallo/Blu	2,1x3,3 - L11,5	11,5 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2133L11,5S
	Giallo/Blu	2,1x3,3 - L13	13 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2133L13S
	Giallo Verde	2,5x3,7 - L6	6 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2537L6S
	Giallo Verde	2,5x3,7 - L8	8 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2537L8S
	Giallo Verde	2,5x3,7 - L10	10 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2537L10S
	Giallo Verde	2,5x3,7 - L11,5	11,5 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2537L11,5S
	Giallo Verde	2,5x3,7 - L13	13 mm	Ti 5 Grade 5	TDC2537L13S

Cacciaviti per Impianti e Protesi



2,42 mm hex

10,00 mm

BT-HD10



2,42 mm hex

15,00 mm

BT-HD15



2,42 mm hex

20,00 mm

BT-HD20



1,25 mm hex

7,00 mm

BT-PD07



1,25 mm hex

10,00 mm

BT-PD10



1,25 mm hex

15,00 mm

BT-PD15

Cacciavite manuale Connessione Protesi e Multi Unit



1,25 mm hex

7,00 mm

BT-HA07



1,25 mm hex

15,00 mm

BT-HA15



1,25 mm hex

950,00 mm

BT-SLD

Adattatore Contrangolo Protesi ed Impianti



1,25 mm hex

2,42 mm

BT-MM242



1,25 mm hex

1,25 mm

BT-MM125

ACCESSORI



Cricchetto

BT-RR



Cricchetto
dinamometrico

BT-RTT



Cacciavite a mano

STFMIJ

3 MODI PER RIMUOVERE L'IMPIANTO DALL'AMPOLLA



1. Rimuovere l'impianto dall'ampolla utilizzando il cricchetto
 - Allentare delicatamente il sigillo ruotandolo con l'uso del cricchetto
 - Estrarre lentamente l'impianto dall'ampolla



2. Rimuovere l'impianto dall'ampolla con l'aiuto del cacciavite
 - Collegare il cacciavite alla guarnizione.
 - Allentare delicatamente il sigillo ruotandolo con l'uso del cacciavite.
 - Estrarre lentamente l'impianto dall'ampolla.



3. Rimuovere l'impianto dall'ampolla con l'aiuto del cacciavite manuale
 - Collegare il cacciavite manuale alla guarnizione.
 - Allentare delicatamente il sigillo ruotandolo con l'uso del cacciavite manuale.
 - Estrarre lentamente l'impianto dall'ampolla.

INDICE

Introduzione	Profilo Aziendale	pag. 01
	Chi siamo	pag. 02
	Materiali	pag. 03
	Trattamento di Superficie	pag. 04
	Packaging	pag. 05
Impianti Dentali K2 - K3	Componenti per Esagono Interno	pag. 06
	Presentazione K2 - K3	pag. 07
	Impianto K2	pag. 10
	Impianto K3	pag. 11
	Monconi Zirconia	pag. 12
Protesi K2 - K3	Monconi Dritti	pag. 13
	Monconi Dritti con Spalla	pag. 14
	Monconi Angolati 15°, 25°, 35° e 45°	pag. 15
	Viti di Guarigione	pag. 16
	Transfer Analogo	pag. 17
	Multi Unit Angolati 17°, 30° e 45°	pag. 18
	Multi Unit Dritti	pag. 19
	Kit Multi Unit Angolati 17°, 30° e 45°	pag. 20
	Kit Multi Unit Dritto	pag. 21
	Protesi Cad Cam	pag. 22
	Monconi a Pallina	pag. 23
	Monconi Locat	pag. 24
Impianto Dentale V4	Moncone Calcinabile	pag. 25
	Presentazione V4	pag. 26
	Impianto V4	pag. 27
	Piattaforma Conica V4	pag. 28
Protesi V4	Viti Guarigione e Monconi, Transfer & Analoghi	pag. 29
	Monconi Dritti	pag. 30
	Monconi Inclinati	pag. 31
	Monconi Provvisori Dritti o con Spalla	pag. 32
	Monconi Calcinabili	pag. 33
	Multi - Unit	pag. 34
	Multi - Unit accessori	pag. 35
	Monconi a Pallina	pag. 36
	Locat	pag. 37
Accessori e Kit chirurgici	Accessori e Kit Chirurgici	pag. 38
	Stop per frese	pag. 41
	Consigli pratici	pag. 44

è facile... è **"SEMPLICE"**



kit di chirurgia guidata **SEMPLICE** - MC 021

 **FDS76**
DENTAL IMPLANTS

 www.fds76.com  info@fds76.com  +39.0965.921832  +39.380.2623587

 Via Giosuè Carducci, 10 - 89018 - Villa San Giovanni (RC)